



ORTHOTRENDS

**Een LOGISCH
twin bracket systeem
om de frictie onder
controle te houden!**



Een **LOGISCH** twin bracket systeem om de frictie onder controle te houden!

Logic[™]
Line

STEP & SLIDE

een logisch straight wire systeem !



De **logic bracket** heeft een speciaal design, een **stepje** zodat de **Slide**[™] ligature mooi past zonder dat het druk uitoefent op de draad.

STEP



Aan de ingang van het slot zit een step, een "schouder", die de speciale Slide-ligatuur belet om met de draad in contact te komen. Zo ligt de draad "passief" in het slot en wordt de frictie sterk verminderd. Deze brackets bestaan in Roth of MBT-prescriptions .022 slot, zowel in metaal als ceramisch.

PASSIEF LIGATUREREN



Met de speciale SLIDE[™] –low friction ligaturen ligt de draad passief in het slot en is de frictie tot een minimum beperkt. De Slide-ligaturen zijn gemaakt uit een speciaal polyuretaan met een lage frictie-coëfficiënt. Deze ligaturen bestaan in metaalkleur, wit voor de ceramische brackets en in diverse kleuren.

ACTIEF LIGATUREREN



Met deze Logic Line[™] Step-brackets kan u echter ook een gewone metaal of plastic-ligatuur gebruiken om de draad stevig in het slot te duwen en zo optimaal te gaan torquen of de tand in positie te houden.



Metalen Logic bracket



Keramische Logic bracket



Met het **STEP LOGIC**[™] systeem bepaalt u dus zelf waar en wanneer u frictie wenst. U hebt alle voordelen van een veel duurder self-ligating bracket, en bovendien kan u nog steeds gekleurde ligaturen gebruiken.

Prescripties



Metalen brackets

STEP SYSTEM

torque	ang.		
			.022"x.030"
+17°	+4°	1/1	F6122-11 F6122-21
+9°	+8°	2/2	F6122-12 F6122-22
-7°	+11°	3/3	F6112-13 F6112-23
-7°	+11°	3/3	F6122-13 F6122-23
-7°	+2°	4/4	F6112-14 F6112-24
-7°	+2°	4/4	F6122-14 F6122-24
-7°	+2°	5/5	F6112-15 F6112-25
-7°	+2°	5/5	F6122-15 F6122-25
-6°	0°	1/1	F6122-41 F6122-31
-6°	0°	2/2	F6122-42 F6122-32
-6°	+5°	3/3	F6112-43 F6112-33
-6°	+5°	3/3	F6122-43 F6122-33
-12°	+2°	4/4	F6112-44 F6112-34
-12°	+2°	4/4	F6122-44 F6122-34
-17°	+2°	5/5	F6112-45 F6112-35
-17°	+2°	5/5	F6122-45 F6122-35

Brackets not available into kits

Packs of 10

STEP SYSTEM Logic Line™			
	6 brackets	10 brackets	
	3 2 1 1 2 3	5 4 3 2 1 1 2 3 4 5	
.022"	F5906-20	F5910-20	
	12 brackets	20 brackets	
	3 2 1 1 2 3 3 2 1 1 2 3	5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5	
.022"	F5912-20	F5920-20	

STEP SYSTEM Logic Line™				
	20 brackets - 1 case		200 brackets - 10 cases	
.022"	F6120-91	F6121-91		
	500 brackets - 25 cases		1000 brackets - 50 cases	
.022"	F6123-91	F6125-91		

ROTH SYSTEM Logic Line™				
	20 brackets - 1 case		200 brackets - 10 cases	
.022"	F6220-91	F6221-91		
	500 brackets - 25 cases		1000 brackets - 50 cases	
.022"	F6223-91	F6225-91		



ROTH SYSTEM Logic Line™

torque	ang.		
			.022"x.030"
+12°	+5°	1/1	F6221-11 F6221-21
+8°	+9°	2/2	F6221-12 F6221-22
-2°	+13°	3/3	F6212-13 F6212-23
-7°	0°	4/4	F6212-14 F6212-24
-7°	0°	5/5	F6212-15 F6212-25
0°		1/1	F6221-41 F6221-31
0°		2/2	F6221-42 F6221-32
-11°	+7°	3/3	F6212-43 F6212-33
-17°	0°	4/4	F6212-44 F6212-34
-22°	0°	5/5	F6212-45 F6212-35

Packs of 10

Esthetische brackets

STEP SYSTEM Logic Line™ in ceramics


torque	ang.		
			.022"x.030"
+17°	+4°	1/1	F5921-02 F5921-03
+9°	+8°	2/2	F5922-02 F5922-03
-7°	+11°	3/3	F5913-02 F5913-03
-7°	+2°	4/4	F5919-02 F5919-03
-7°	+2°	5/5	F5919-02 F5919-03
-6°	0°	1/1	F5920-06 F5920-07
-6°	0°	2/2	F5920-06 F5920-07
-6°	+5°	3/3	F5913-06 F5913-07
-12°	+2°	4/4	F5914-06 F5914-07
-17°	+2°	5/5	F5915-06 F5915-07

ROTH SYSTEM Logic Line™ in ceramics

torque	ang.		
			.022"x.030"
+12°	+5°	1/1	F5921-12 F5921-13
+8°	+9°	2/2	F5922-12 F5922-13
-2°	+13°	3/3	F5913-12 F5913-13
-7°	0°	4/4	F5919-12 F5919-13
-7°	0°	5/5	F5919-12 F5919-13
0°		1/1	F5920-05
0°		2/2	F5920-05
-11°	+7°	3/3	F5913-16 F5913-17
-17°	0°	4/4	F5914-16 F5914-17
-22°	0°	5/5	F5915-16 F5915-17

ROTH SYSTEM Logic Line™			
	6 brackets	10 brackets	
	3 2 1 1 2 3	5 4 3 2 1 1 2 3 4 5	
.022"	F5906-21	F5910-21	
	12 brackets	20 brackets	
	3 2 1 1 2 3 3 2 1 1 2 3	5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5	
.022"	F5912-21	F5920-21	

ORTHOTRENDS

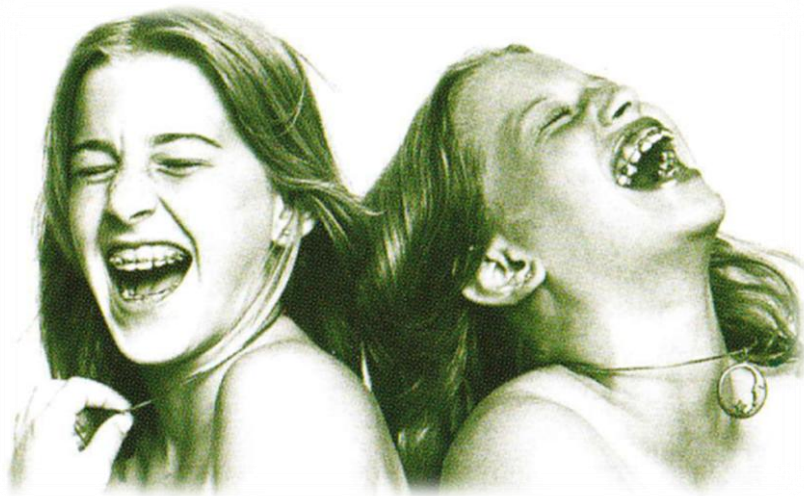

CONTACT **GEGEVENS**

Telefonisch

(09) 222 06 80

Elke werkdag, niet op vrijdagmiddag.

8u30 - 12u en 13u - 17u

Fax

(09) 222 13 03

E-mail

info@orthotrends.com

Website

www.orthotrends.com

Kantoren en showroom

Ortho-Trends bvba

Luchthavenlaan 33

9051 Gent/SDW